


1

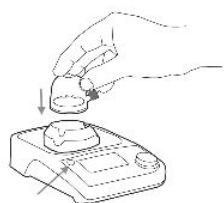

Retire la cápsula VARIXIO® Pod de su embalaje y colóquela en la base de acoplamiento del agitador VARIXIO® Pro Mag, en la posición para diestros o zurdos, según corresponda.

Pulse .

2



Cargue una jeringa de 5 mL o 10 mL con 2 mL de líquido esclerosante (POL o STS). Retire el tapón Luer de la cápsula, acople firmemente la jeringa a la cápsula y cargue la cápsula con los 2 mL de líquido esclerosante.

3



Seleccione el programa adecuado con el dial START/STOP. Gire el dial para seleccionar y presiónelo para confirmar cada selección.


1. Tipo de cápsula ("AIR" para uso con VARIXIO® Pod Air, "LOW N2" para uso con VARIXIO® Pod Low N2).

2. Tipo de esclerosante (POL o STS).

3. Concentración ($<1\%$ o $\geq 1\%$ para POL, o $<0.5\%$ o $\geq 0.5\%$ para STS).

Pulse  para volver a la selección anterior.

Sin retirar la jeringa del puerto Luer, presione nuevamente el dial para iniciar la agitación. Espere mientras se genera la espuma.

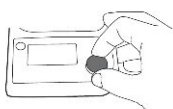

4




Una vez finalizada la fase de producción de espuma (menos de 50 segundos), el agitador reducirá automáticamente su velocidad (pero no se detendrá por completo) y aparecerá un icono de jeringa en la pantalla para indicar que la espuma ya puede ser extraída.

5



Antes de aspirar la espuma, presione la jeringa hacia abajo para vaciar el aire que pueda contener.

6

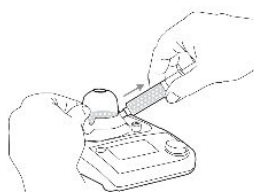


Mantenga la cápsula en el agitador y, mientras continúa agitando a baja velocidad, aspire cuidadosamente la espuma a una velocidad no superior a 1 mL por segundo.

7



Cierre el tapón Luer. En el caso del Pod Air, la espuma restante puede mantenerse en agitación a baja velocidad para su uso posterior en el mismo procedimiento durante un máximo de 15 minutos. En el caso del Pod Low N2, aspire la espuma en una sola aspiración inmediatamente después de que el programa haya finalizado.

8

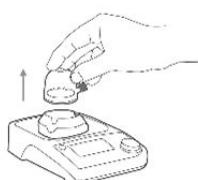

Finalmente, detenga la agitación presionando nuevamente el dial START/STOP y deseche la cápsula. Pulse  para programar otro uso.